

cardiofax^C

Elektrokardiograph ECG-3150

Hochwertige Diagnosen immer in Ihrer Reichweite



Hochwertige Diagnosen immer in Ihrer Reichweite

Hochwertige Diagnosen

Präzise Daten für eine schnellere Diagnose

Die fortschrittliche Filtertechnologie eliminiert Rauschen mit weniger Kurvenverzerrungen. Nihon Kohdens ECAPS 12C EKG-Analyseprogramm liefert mehr als 200 Ergebnisse mit detaillierter Analyse. Es basiert auf einer Konturendatenbank mit 13.000 EKGs und einer Rhythmusdatenbank mit 19.000 EKGs.


Plötzliche Arrhythmien erkennen

Das farbige, 5 Zoll große TFT-Display ermöglicht eine klare 12-Kanal-Kurvenüberwachung und reduziert die Wahrscheinlichkeit einer Zweitmessung. Der interne 3-Minuten-EKG-Speicher (mit 12 Ableitungen) stellt sicher, dass alle wichtigen Informationen erhalten bleiben.

Hochwertige Untersuchungen jederzeit und überall


Ein geringes Gewicht und die kompakte Bauweise garantieren Ihnen eine einfache und mühelose Handhabung. Die langlebige Batterie ermöglicht eine qualitativ hochwertige und mobile Untersuchung, überall.

*180 Minuten oder mehr, abhängig von den Anwendungsfaktoren.

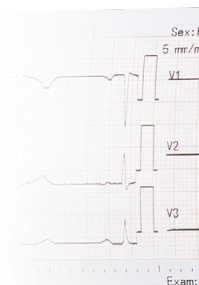

Hochwertige Verfügbarkeit der Patientendaten


Cardiofax C (ECG-3150) unterstützt verschiedene Arten der Datenausgabe, die über LAN oder ein eingebautes WLAN-Modul erfolgt.

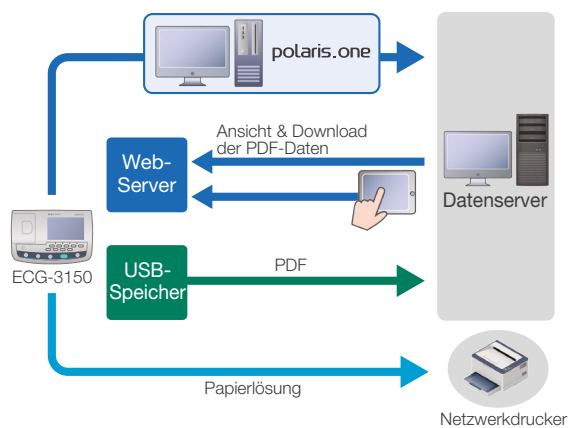

Mit der Abfragefunktion können die Daten eines Patienten in das Cardiofax C heruntergeladen werden, um sie mit der bevorstehende EKG-Untersuchung zu verknüpfen. Zusammen mit Nihon Kohdens EKG-Portfolio und dem Workflow-Management-Tool polaris.one steht eine starke Systemlösung zur Verfügung.


Der „Webserver“ des Cardiofax C bietet eine einfache Lösung für die Datenverwaltung (Ansicht und Download als PDF-Datei über Webbrowser*).

*Für den Einsatz im internen Netzwerk ist ein kompatibler Webbrowser und sowie Umgebung erforderlich.

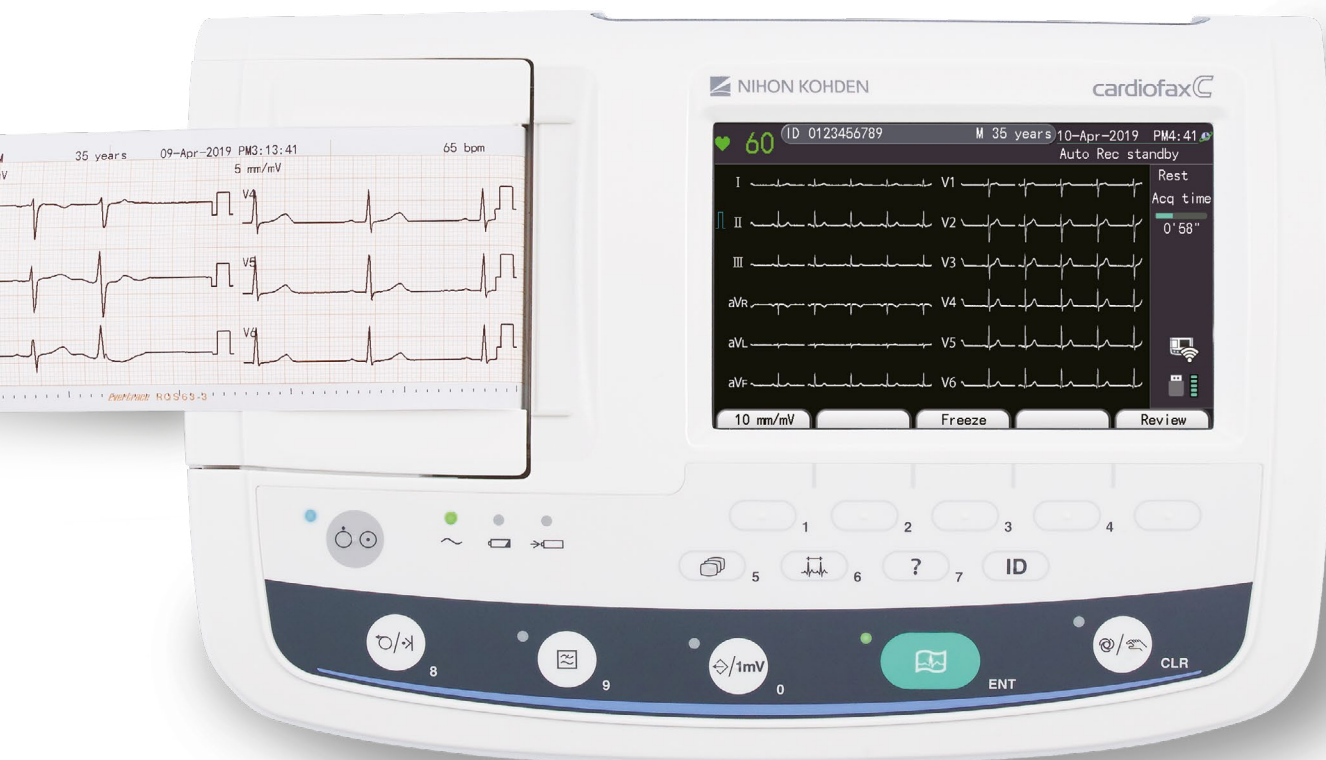


Druckbeispiele

12-Kanal-EKG (3 Kurven x 4 Gruppen) mit Analyseergebnissen

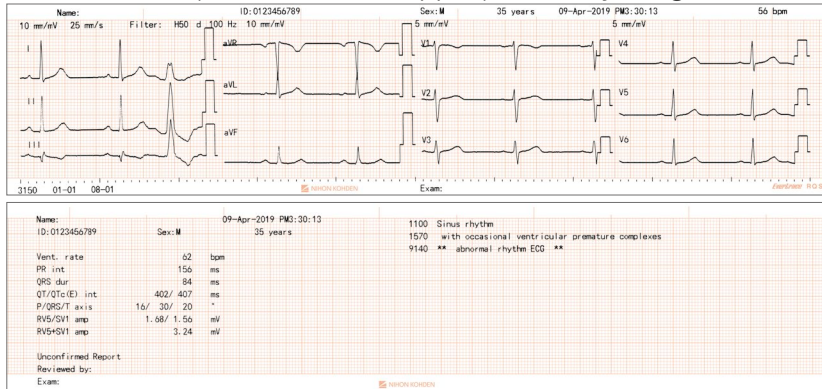

1-kanalige Rhythmus-Aufzeichnung

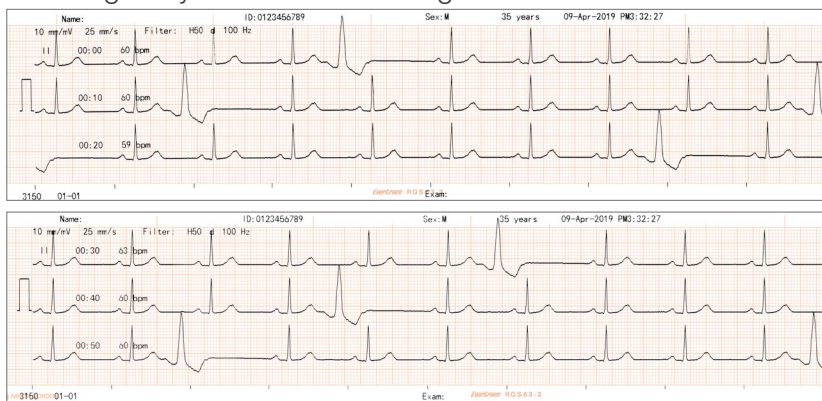

Optionen

- Gerätewagen, KD-105D/E
- Kabelhalterung, KH-100D
- USB Speichermedium, DTSE9G2/16GB oder gleichwertig

Spezifikationen Cardiofax C (ECG-3150)

| | |
|---------------------------------------|--|
| Abmessungen | 260 B x 75 H x 172 T mm |
| Gewicht | 1,1 kg (ohne Netzteil, Batterie und Aufzeichnungspapier) |
| Batterie | Inklusive (SB-301DC) |
| Batteriebetriebsdauer | 180 Minuten |
| Größe, Auflösung, Art des Bildschirms | 5 Zoll, 800 x 480 Dpi, Farbige TFT-Display |
| W-Lan-Funktion | Modul bereits integriert (QI-330D) |
| Anzahl der Ableitungen | 3 |
| Papiergeschwindigkeit | 25, 50 mm/s |
| Papierbreite | 63 mm breit |
| Sicherheits- und Leistungsnormen | IEC 60601-1 Ed3.1: 2012, IEC 60601-2-25: 2011, IEC 60601-1-2: 2014 |

NIHON KOHDEN DEUTSCHLAND GmbH
Raiffeisenstrasse 10, 61191 Rosbach, Deutschland
Telefon: +49 6003 827 0, Fax: +49 6003 827 599
Internet: <https://eu.nihonkohden.com>, E-mail: bestellung@nke.de

NIHON KOHDEN EUROPE GmbH
Raiffeisenstrasse 10, 61191 Rosbach, Deutschland
Telefon: +49 6003 827 0, Fax: +49 6003 827 599
Internet: <https://eu.nihonkohden.com>, E-mail: info@nke.de

NIHON KOHDEN CORPORATION
1-31-4 Nishiochiai, Shinjuku-ku, Tokyo 161-8560, Japan
Telefon: +81 (3) 59 96-80 36, Fax: +81 (3) 59 96-81 00
Internet: www.nihonkohden.com